


## コピープラスト

### 再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理】

- ・原材料：ポリエチレン成形用及び押出用材料

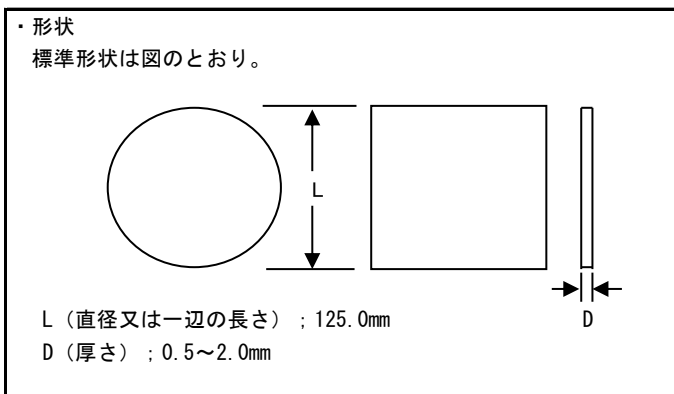

#### 【使用目的、効能又は効果】

- ・歯科用装置（ブラケットトランスファートレイ、複模型、テンポラリークラウンまたはブリッジ用印象）の作製

#### 【操作方法又は使用方法】

- ・本品は加圧成型器（推奨成型器：シヨイデンタル社製バイオスター、ミニスター）により加圧形成して用いる。
- ・種類別の成型条件（バイオスター、ミニスター）は下表のとおり。但し、コード使用はバイオスター、ミニスターS scanのみ
- ・下表成型条件はあくまでも目安です。プレートに印字されているCode/バーコードを御使用下さい。

Heat (加熱時間)、Cool (冷却時間) : 単位sec

★

Dmm	商品番号 丸／角	Code	Heat	Cool
0.5	3177／3176	122	30	60
0.75	3169／	122	30	60
1.0	3179／3178	162	50	60
1.5	3175／3174	192	65	60
2.0	3181／3180	233	90	120
1.0	3404／3403	234	90	150

#### 【使用方法に関連する使用上の注意】

- ①成型は使用する成型器の取扱説明書に従い、行ってください。
- ②成型の際、過加熱にご注意ください。
- ③本品はアクリル系材料と接着しない。
- ④本品成型の際は、通風の良い場所で行って下さい。

#### 【使用上の注意】

##### 1) 使用注意

- ①本品は再使用しないこと。
- ②本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ③本品は【使用目的】欄に記載されている目的以外には使用しないこと。
- ④万が一、製品に変形等の異常がある場合には、使用せずに弊社までご連絡ください。

#### 2) 重要な基本的注意

- ・本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

#### 【包装】

- ・単品包装 10枚入り

#### 【貯蔵・保管方法】

- 1) 外圧がかからないように保管する。
- 2) 加熱機器（ストーブ等）周辺には保管しないこと。

#### 【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 : 株式会社ロッキーマウンテンモリタ  
住所 : 東京都千代田区神田駿河台2-2  
御茶ノ水杏雲ビル14F  
電話番号 : 03-5281-4711  
FAX番号 : 03-5281-4716